



SILLÓN MASAJEADOR MODELO INFINITUM

INSTRUCCIONES DE USO



Gracias por adquirir este producto. Por favor lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de utilizarlo. Presta mucha atención a las instrucciones de seguridad importantes antes de usarlo.

Seguridad y Mantenimiento

1. ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Utilizar el suministro eléctrico adecuado con conexión a tierra para este producto.
- Asegúrese de desconectar el enchufe después de su uso y antes de limpiarlo para evitar daños al producto y a la persona.
- Asegúrese de utilizar este producto de acuerdo con este manual de instrucciones.
- Por favor no utilizar accesorios que no sean los recomendados para el equipo.
- No utilizar este producto al aire libre.
- No derramar líquidos sobre este producto.
- No utilizar luego de consumir bebidas alcohólicas o si sufre de algún malestar.
- No utilizar el producto después de las comidas con estómago lleno.
- No utilizar con aros, relojes y collares ya que puede ocasionar posibles lesiones.
- Utilizar con ropa cómoda.
- No pararse en la reposapiés cuando este está levantado, puede ocasionar caídas.

2. Ambiente adecuado para el uso.

- No utilizar en altas temperaturas o en ambientes húmedos tales como baños.
- No utilizar en ambientes polvorientos o cáusticos.
- No utilizar en ambientes que carecen de espacio o de mala ventilación.

3. No se recomienda el uso a las siguientes personas:

- Personas que padecen de osteoporosis agravada.
- Personas con marcapasos.
- Personas con fiebre.
- Mujeres embarazadas o mujeres durante el período menstrual.
- Si padece de lesiones en la piel.
- Niños menores de 12 años o personas que padezcan de un desequilibrio mental sin supervisión.
- Personas a las que se les ordenó reposo médico o si sufre de algún malestar.
- Personas con el cuerpo mojado.
- El producto cuenta con función de calor para termoterapia, las personas que no poseen sensibilidad al calor deben ser particularmente cuidadosas al utilizar dicha función.

4. Seguridad.

- Este equipo usa voltaje 220, verificar si el voltaje concuerda.
- Asegúrese de que sus manos estén secas antes de desenchufar el producto.
- Evite derramar agua dentro del producto para evitar daños.

- No dañar los cables o cambiar el circuito de este producto.
- No utilice un paño húmedo para limpiar las partes eléctricas tales como el interruptor y el enchufe.
- Absténgase de utilizar este producto si padece de algún malestar. Por favor consulte a su médico.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por adultos mayores ni niños con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento a menos que sean supervisados e instruidos para utilizar este aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato.
- Si el cable se encuentra dañado, debe ser reemplazado por el técnico o una persona calificada con el fin de evitar un riesgo.
- En los lugares donde hay problemas de tensión eléctrica se recomienda utilizar con un elevador de tensión para prevenir un posible daño en el producto.

5. Mantenimiento

- El mantenimiento de este producto debe estar a cargo de un técnico capacitado.
- Por favor si no lo utiliza por un tiempo prolongado debe apagarlo con el botón de ENCENDIDO-APAGADO que se encuentra en la parte posterior de la base.
- Si este producto no se utiliza durante mucho tiempo, asegúrese de enrollar los cables y guardar este producto en un ambiente seco y sin polvo.
- Se ruega no dejar este producto en contacto con temperaturas altas o cerca del fuego y evite la exposición directa con el sol durante tiempo prolongado.
- Limpiar este producto con un paño seco. No utilice tiner, solvente, benceno, alcohol o cualquier otra sustancia abrasiva. Se le recomienda usar spray de silicona no intrusiva.
- Los componentes mecánicos de este producto fueron diseñados cuidadosamente y no necesitan de mantenimiento especial, solo requiere engrasar cada cierto tiempo.
- No utilizar bordes filosos para empujar este producto.
- No rodar o deslizar este producto sobre superficies irregulares, debe levantarse para movilizarlo.

6. Soluciones para las fallas comunes.

- Es normal oír un sonido de movimiento de los rodillos o de bolsas de aire mientras se está utilizando el producto.
- Si el sillón o panel de control no enciende, verificar que el enchufe y el interruptor están propiamente conectados y que el interruptor este encendido.
- Cuando el tiempo de funcionamiento normal finalice, el producto activará automáticamente el botón de apagado. Si este producto se calienta por uso prolongado excesivo, el protector de temperatura se activa y se apagará el producto automáticamente y se podrá utilizar nuevamente después de media hora de descanso.

Nombre y funciones de los Componentes



1. Bolsa de Aire para masajear los hombros.
2. Panel de control LCD.
3. Bolsa de Aire para para masajear brazo y mano.
4. Funda larga de espalda y asiento emite calor (Termoterapia).
5. Bolsa de Aire para masajear Pantorrilla.
6. Reposapiés con bolsas de aire y sistema de rodillos en la planta de los pies.
7. Funda de cabecera.
8. Conector del cable eléctrico con botón switch al costado.
9. Ruedas para un fácil traslado.

Función & Beneficios

El sillón está diseñado para brindar relajación, estimulación y rehabilitación a las diferentes partes del cuerpo, ayudando a mejorar la flexibilidad de los músculos, promover una mejor circulación y a su vez, reducir el estrés. Cuenta con una Placa electrónica que está diseñada para llevar a cabo varios estilos de masajes inteligentes y combinaciones de masaje con precisión, incluye además trabajar con diferentes programaciones desde la planta de pies, gemelos, glúteos, brazos y toda la espalda, desde la zona lumbar a la zona cervical.


Características:

- Cuenta con panel de control LCD a color.
- Sistema de Posición Gravedad Cero.
- Sistema de riel alargado los rodillos robóticos llegan a los glúteos y la pierna.
- Parlantes ambientales vía Bluetooth
- Sistema de Auto Escaneo para brindar un masaje más personalizado.
- Sistema de Masaje Tridimensional FullBody que abarca desde la cabeza hasta planta de los pies.
- 06 programas diferentes que consisten en combinaciones diferentes de masajes.
- Sistema AirBag ofrece masaje Presoterapia con bolsas de aire en brazos, Hombros, manos, glúteos, pantorrillas, pies.
- Reflexología podal avanzado con el sistema de rodillos inteligentes.
- Calor infrarrojo Termoterapia Avanzada en la espalda.
- Peso máximo soportado : 100 Kg

Beneficios Principales:

- Previene la fatiga.
- Mejora la circulación sanguínea.
- Alivia la fatiga muscular
- Calma la tensión muscular.
- Disminuye el dolor de nervios.
- Alivia el dolor muscular.

PANEL DE CONTROL LCD

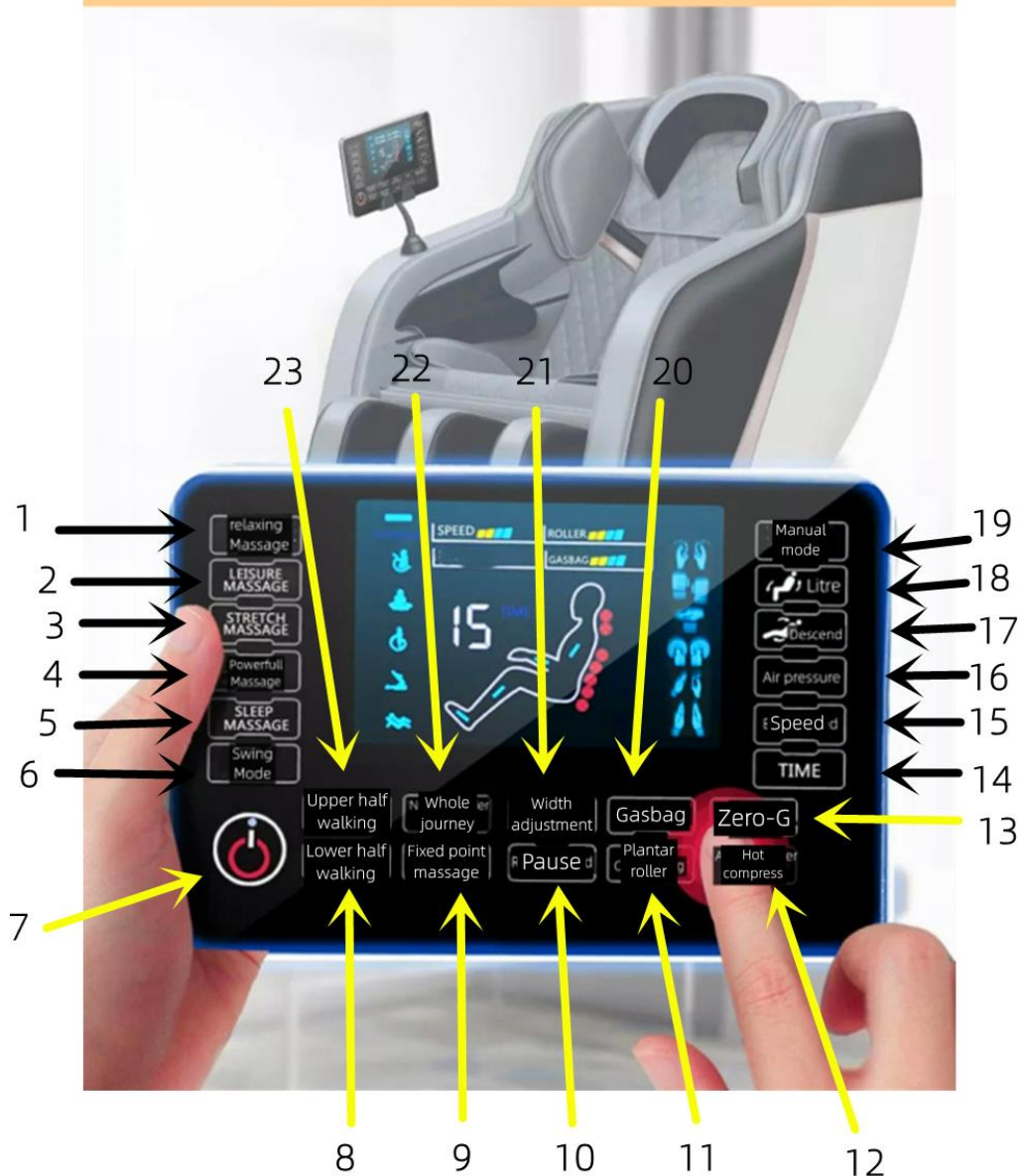


01. Relaxing Massage : modo de masaje relax.
02. Leisure Massage : modo de masaje para aliviar dolor de lesiones.
03. Stretch Massage : modo de masaje estiramiento.
04. Powerfull Massage : modo de masaje fuerte.
05. Sleep Massage : modo de masaje suave para mejorar sueño.
06. Swing Mode : modo de masaje balanceo (consume más energía eléctrica y genera más desgaste de pieza)

07. Botón de ENCENDIDO Y APAGADO. Cabe señalar que al encender el sillón en forma automática activa todas las funciones de masaje. El usuario también puede entrar en modo manual para escoger el tipo de masaje específico en una zona determinada con la fuerza e intensidad deseada.
08. Lower half walking : programar masaje solamente en la zona de espalda baja (lumbar glúteos) (funciona solo en modo manual)
09. Fixed point massage : estabilizar masaje en un punto específico de la espalda.
10. Pause : pausar/activar el sillón durante uso.
11. Planta roller : activar/desactivar, graduar la intensidad de masaje en la planta de los pies (visualiza el cambio de la figura indicadora en la pantalla para un mejor manejo)
12. Hot compress : activar/desactivar calor en la espalda (termoterapia)
13. Zero-G : activar la posición de gravedad cero para un masaje más estimulante.
14. TIME : programa el tiempo de masaje 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 minutos.
15. Speed : programar la velocidad de masaje en la espalda (3 niveles)
16. Air pressure : gradua la intensidad de las bolsas de aire (3 niveles)
17. Descend : indicar la posición del sillón hacia atrás (presionando fijo)
18. Litre : levantar la posición del sillón hacia adelante (presionando fijo)
19. Manual mode : activar el modo manual (a la vez desactiva el modo automático)
20. Gasbab : desactivar/activar las bolsas de aire en forma sincronizada (visualiza el cambio de la figura indicadora en la pantalla para un mejor manejo)
21. Width adjustment : programar anchura de los rodillos (disponible solo para masaje de golpeteo, masaje de palmas, masaje de acunpresión en modo manual)
22. Whole journey : programar masaje toda la zona de espalda (funciona solo en modo manual)
23. Upper half walking : programar masaje solamente en la zona de espalda superior (cabeza nuca cervical espalda superior) (funciona solo en modo manual)

Método para la movilización del Sillón Masajeador

Asegúrese que todos los cables estén muy por encima del suelo. Inclíne el respaldo hacia atrás a un cierto grado (con el centro de gravedad apoyado sobre las ruedas). Empuje el sillón hacia adelante y hacia atrás con las manos. Finalmente, llévalo nuevamente a la posición normal de manera lenta y suave.

- Precaución: No movilice el sillón sobre sus ruedas en piso de madera, piso rústico o donde haya espacio reducido. Se necesitan dos personas para mover el sillón.

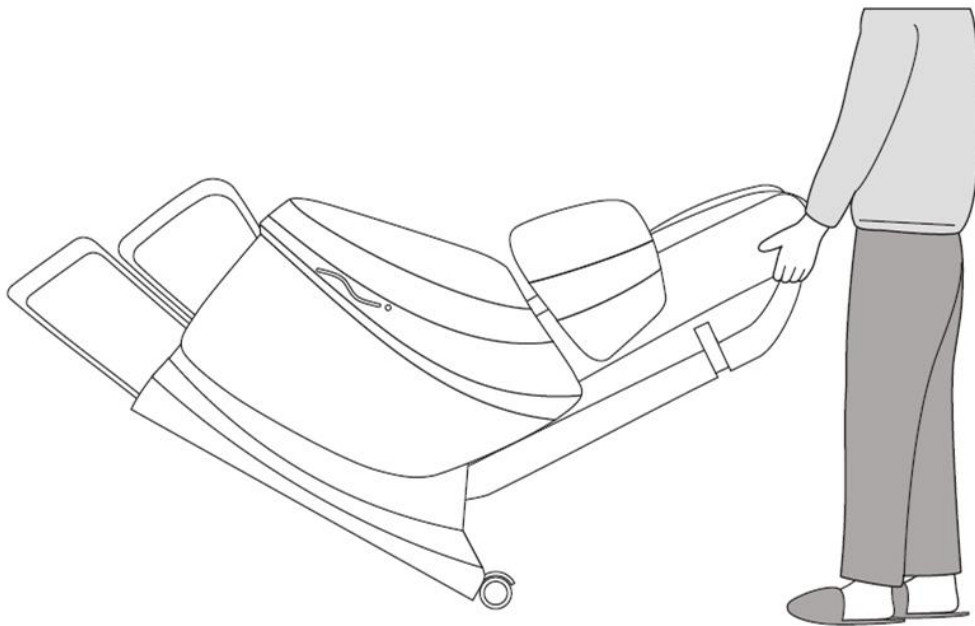

Especificaciones del producto:

Modelo: INFINITUM

Descripción: Sillón Masajeador

Voltage Nominal: 220-240V~ 50Hz 60Hz

Potencia Nominal de Entrada: 150W

Tiempo Nominal de Funcionamiento: 05 - 30 minutos